

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali -160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered


www.tynorindia.com

Wrist Wrap (Neoprene)
Wrist Brace with Double Lock

REF J 04/E 05



Wrist Wrap (Neoprene)

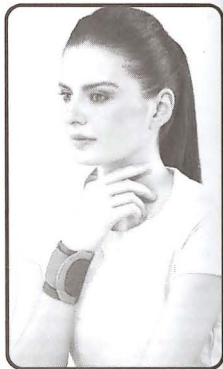

Wrist Brace
with Double Lock

UM-J04/E05-18-2

USER MANUAL

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام

- The product is wrapped around the wrist and fastened to a comfortable compression.
- यह उत्पाद कलाई पर लपेटा जाता है और आरामदायक दबाव मिलने तक कसा जाता है।
- El producto se envuelve en torno a la muñeca y se sujeta ejerciendo una compresión confortable.
- Le produit est enroulé autour du poignet et attaché à une compression confortable.
- يتم لف المنتج حول المعصم وربطه إلى الحد الذي يمنح الضغط المريح.

Wrist Wrap (neoprene) & Wrist Brace with Double Lock

English

INTENDED USE :

Wrist Wrap (Neoprene) and Wrist brace with double lock are designed to support, protect and partially immobilize the wrist. They compress the area and retain the body heat to allay local pain and inflammation.

CONSTRUCTION:

Wrist Wrap (Neoprene) is made out of three layered Neoprene foam bonded fabric. The middle layer is made from elasticised neoprene rubber foam, which provides four way stretch to the fabric. The top layer is made out of a very special fabric with unbroken loops. Unbroken loop fabric offers the advantage of a very versatile closing system to provide easy application and a firm grip to the wrist.

Wrist brace with double lock is made from strong, porous orthopedic webbing. Double hook loop locking system enhances the immobilization and provides a firm grip to the wrist.

APPLICATIONS :

- Post operative and post cast care.
- Tendonitis, Tenosynovitis
- Arthritic care of the wrist

- Prophylaxis in exercise and games
- Carpal tunnel syndrome
- Sprain and Strain
- Dislocation of wrist joint

RECOMMENDATION :

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.

INSTRUCTIONS: (ⓘ)

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

रिस्ट रैप (नियोप्रीन) एंड रिस्ट ब्रेस विद डबल लॉक

Hindi

उपयोग :

रिस्ट रैप (नियोप्रीन) और रिस्ट ब्रेस विद डबल लॉक कलाई को सहारा, सुरक्षा देने और आंशिक रूप से स्थिर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये उस हिस्से को संपीड़ित करते हैं और स्थानिक दर्द और प्रदाह को दूर करने के लिए शरीर की गर्माहट को बनाए रखते हैं।

निर्माण:

रिस्ट रैप (नियोप्रीन) तीन परत के नियोप्रीन बाण्डेड फ़ैब्रिक से निर्मित है। इसकी मध्य परत इलास्कृत नियोप्रीन रबर फोम से बनती है, जो इस फ़ैब्रिक को चोतरफा खिंचाव प्रदान करती है। शीर्ष परत मावुल छल्लों वाले बेहद खास फ़ैब्रिक से बनती है। मावुल छल्लों वाला फ़ैब्रिक (अनब्रोकन लूप फ़ैब्रिक) पहनने में आसानी और कलाई को मजबूत पकड़ प्रदान करने के लिए बेहद परिवर्तनशील बंद करने की प्रणाली (क्लोजिंग सिस्टम) का लाभ पेश करता है।

रिस्ट ब्रेस विद डबल लॉक मजबूत, छिद्रयुक्त आर्थोपेडिक फ़ीते से बना होता है। दोहरे हुक वाली लॉकिंग प्रणाली स्थिरीकरण में वृद्धि करती है और कलाई को मजबूत पकड़ प्रदान करती है।

अनुप्रयोग:

- ऑपरेशन और प्लास्टर उपरांत देखभाल।
- पेशीयशोथ (टेंडोनाइटिस), टेनो माइनोवाइटिस,
- कलाई की संधि प्रदाह संबंधी (आर्थ्रिटिक) देखभाल
- व्यायाम और खेलकूद के दौरान सुरक्षा के लिए
- कार्पल टनल सिंड्रोम
- मोच या खिंचाव
- कलाई के जोड़ का संधि भंग (डिसलोकेशन)